



## 1 前言


### 尊敬的顾客：

感谢您惠顾最新型的爱安德电子血压计。为追求血压计的正确、方便使用，使它成为您每天血压管理上的最佳助手，敬请在使用前，详细阅读此说明书。

### 用前需知

本产品适用于人体收缩压、舒张压及脉搏的测量。  
本血压计采用精密部件制造。尽量避免下述环境中的过度异常使用，诸如高温、潮湿、阳光直射、震荡或灰尘。  
用柔软干布清洁仪器。不要用稀释剂、酒精、汽油或者湿布清洁仪器。  
避免过度用力折叠臂带或过度扭曲充气管，并放置很长时间。因为这样会缩短相关仪器的寿命。  
本血压计和臂带无防水性能，因此应避免雨水，汗水和水。  
假若血压计使用时靠近电视、微波炉、脉冲电话机、X射线或其他强电场时，其测量将受到干扰。  
用过的仪器、零部件和电池不能作为一般家庭废物处理，而应当按照相关规定进行处理。  
本血压计只适用于成年人，婴幼儿及无自主行为意识能力者请勿使用。

## 2 组件图示

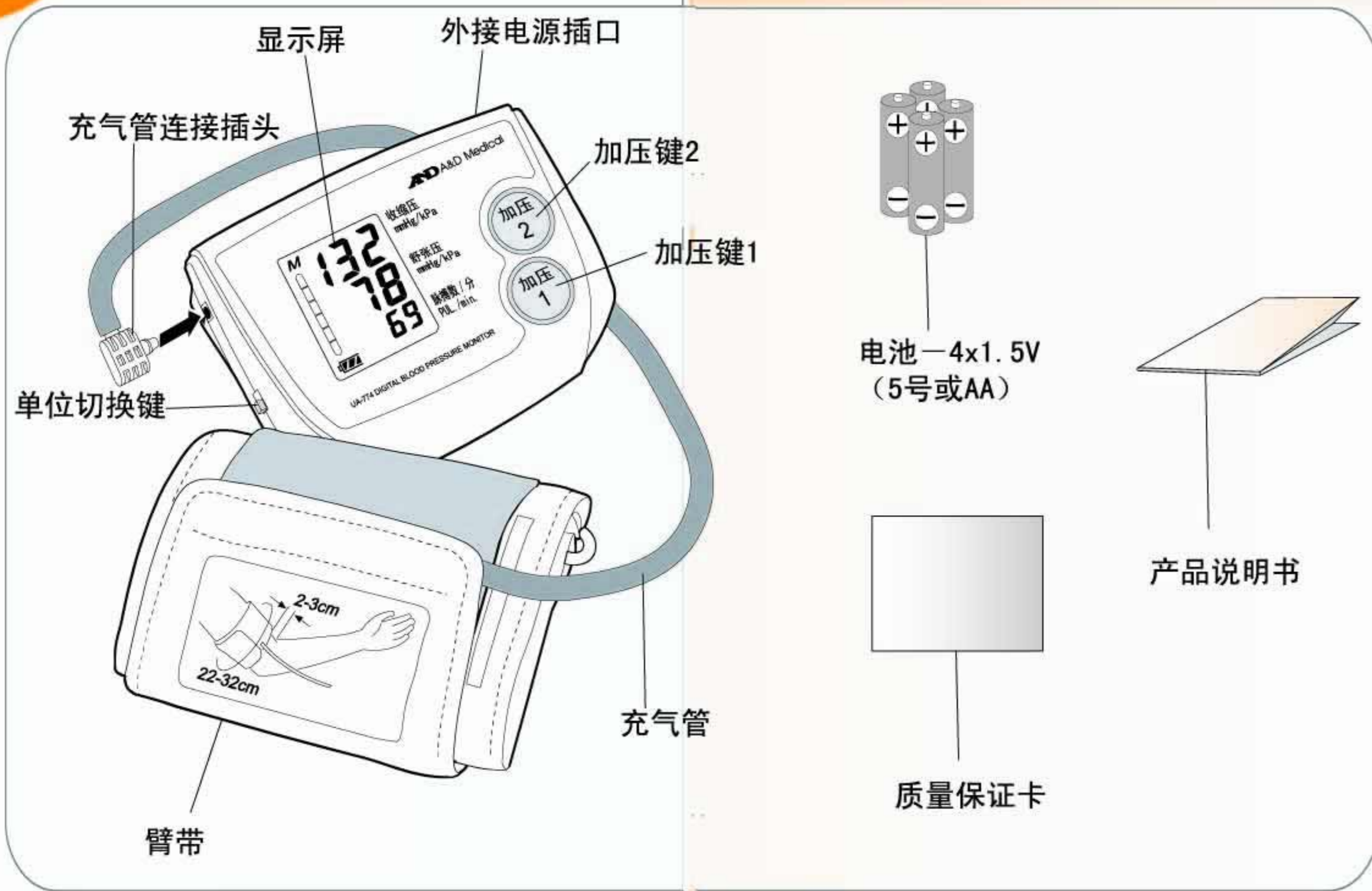

## 3 标记含义

记忆标记	M	收缩压(高压)	132
压力柱		舒张压(低压)	78
测量标记	L	脉搏数	69
电池电量标记	☺	IHB心律不齐标记	☺

标记	功能/意义	处置
☺	当进行测量或测到脉搏时，即显示本标记	测量中，请保持安静
☺	装填电池指示方向	
M	以前的测量记录存储于此	
Err	在测量过程中由于身体移动导致血压值不稳定时出现本标记 测量结束后，若收缩压和舒张压都在10mmHg内时显示本标记 臂带加压时，血压值不增加时显示本标记	请再次测量。在测量过程中请勿移动身体，保持放松和安静的状态 请正确佩戴臂带，并重新测量
Err CUF	臂带未缠紧的通报	请正确缠好臂带并重新测量，在测量时请保持安静
Err PUL	未记录脉搏	请正确缠好臂带并重新测量，在测量时请保持安静
☺	正常的电池电压	
☺	电池的电压低	当指示器显示仅剩一格电量或者指示器开始闪烁时，请更换新电池
⊕	内部电源B型	
SN	序列号	
☺	在测量过程当中，当测量到心脏跳动不规则	在正确的操作下，如果出现频率较高，建议到正规医院进行心电图检查

## 4 关于UA-774

### 血压计的功能特点

- ◆ 高精度A/A(医院级)
- ◆ 三行显示屏
- ◆ 记忆30次测量结果
- ◆ IHB心律不齐检测功能
- ◆ 毫米汞柱(mmHg)与千帕斯卡(kPa)单位切换功能
- ◆ 舒适臂带
- ◆ 自动计算平均血压
- ◆ 电池电量逐格显示
- ◆ 4节AA电池
- ◆ 可供2-3人测量
- ◆ 智能加压测量

平均血压—保存在血压计存储器内的所有测量数据的平均值。

### 技术资料

型号 : UA-774  
名称 : 全自动上臂式血压计  
测量方法 : 示波测量  
测量范围 : 压力 : 0.0kPa - 37.3kPa (0mmHg-280mmHg)  
脉搏 : 40次/分-200次/分  
测量准确性 : 压力 : ±0.4kPa (±3mmHg) 或者2%  
脉搏 : ±5%  
电源 : 4x1.5V 电池 (5号或AA)  
上臂周长 : 22-32cm  
操作条件 : +5℃~+40℃, 相对湿度≤80%, 大气压力86kPa~106kPa  
保存条件 : 相对湿度≤85%的室内  
尺寸 : 147mm(长) x 64mm(高) x 110mm(宽)  
重量 : 大约300g, 电池除外

### 毫米汞柱(mmHg)与千帕斯卡(kPa)单位切换

本血压计以毫米汞柱(mmHg)为默认测量单位。如以千帕斯卡(kPa)为测量单位，请按照以下操作：

将单位切换键滑动至kPa档，此后血压计所测量到的血压值或已保存的血压值都将以kPa为单位显示。

如需进行千帕斯卡(kPa)到毫米汞柱(mmHg)的单位切换，同理只需将单位切换键滑动至mmHg档即可轻松实现。

单位切换键



## 5 测量前的准备工作

### 安装/更换电池

- 装入电池时，要按照电池盒内的电极方向，否则血压计不能工作。
- 当☺(低电压标记)显示时，请更换新电池，并妥善处理废弃电池。
- 当电池用尽时，☺(低电压标记)并不会出现。
- 电池寿命与环境温度有关，在低温情况下，寿命会缩短。
- 血压计原配电池仅限于测试血压计性能，寿命有限。
- 当血压计长时间不用时应取出电池，否则电池可能会漏液和失去功能。

### 接通专用外接电源(选件)

- 将专用外接电源插在家用交流电插座上。
- 将专用外接电源插头插入位于血压计面板右方的电源接口。



电池的安裝

接通电源

### 准备测量

1. 请将充气管连接插头插入位于血压计侧面的插口。
2. 请将臂带缠绕在距肘关节2-3厘米处，并保持臂带中心位置与心脏齐平。请勿将衣袖卷起(这有可能影响血液循环)并请勿在穿着厚实的衣服时进行测量。
3. 过紧或过松缠绕臂带会影响血压计的准确测量，应保持臂带与手臂间能插入1根手指的空隙。



插好充气管连接插头

2-3cm

测量时的正确姿势

用未正确固定的臂带进行测量将有可能使测量结果不可靠。  
请勿向未固定或在手臂上未固定好的臂带充气，因为这有可能导致臂带破裂。

## 6 进行测量

### 进行测量

1. 按一下“加压”键，开启血压计。
- 屏幕上将显示M, A (Average-平均值)和平均血压值。A字母旁边的数字显示的是记录在血压计存储装置内的测量次数。当在血压计存储器内没有任何测量记录时，屏幕上将显示A00。
- 在屏幕上显示符号0时，内置的微处理器开始自动充气到测量时所需要的压力值。



开启血压计





4次测量的平均值



准备好测量

- 在充气过程中，臂带中空气的压力值将以数字形式显示在屏幕上。
- 2. 当臂带中的空气压力达到所需的数值后，臂带中的空气将开始自动排出。在屏幕上将显示♥标记并随脉搏跳动而闪烁，即表示测量正在进行。在这时，请保持安静和姿势的正确。

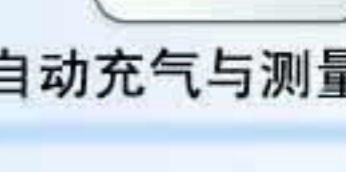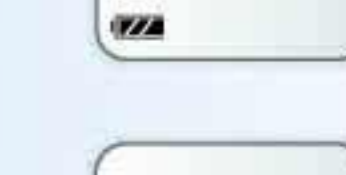

自动充气与测量过程

注:假若充气不完全或不能得到合适的压力，血压计将自动再次充气。

## 7 测量结果

如果预计的收缩压值超过180毫米汞柱，那么应单独设定臂带充气加压值。

- 按一下“加压”键，开启血压计。
  - 再次按下并按住“加压”键。
  - 当臂带中的压力超过预计的收缩压30-40毫米汞柱时，请将“加压”键松开。
  - 然后请遵照《进行测量》章节第2项的建议进行测量。
3. 完成测量后，留在臂带中的空气将自动排出，在屏幕上将同时显示血压值(收缩压，舒张压)和脉搏数。



IHB心律不齐标记

收缩压  
舒张压  
脉搏数/分

当某测量条件得不到满足时，血压计将自动确定错误并将其错误代码显示在屏幕上。为了将错误清除，请按下“加压”键关闭血压计并按照本书第3项表格中的指示意见进行处理。

4. 请取下臂带。
5. 请将测量结果写到血压健康动态表中，以便医生对您的血压健康进行诊断。
6. 按一下“加压”键关闭血压计或者过1分钟后血压计将自动关闭。在测量过程当中，当测量到心脏跳动不规则时将显示☺(心律不齐)标记。

### 测量错误实例



错误信息代码



臂带未缠紧代码

## 8 数据保存与查询

### 1. 平时测量的数据保存

请按下“加压1”键或“加压2”键。开始测量，测量之后血压计自动分开保存测量数据。本血压计的每个键能保存最近的15组数据。两个人规律性的使用血压计时，建议一个人使用“加压1”键，另一个人则使用“加压2”键，做到血压区分管理。



(最近一次) 测量



最近一次测量的结果

### 2. 数据查询

要查询数据时，请持续按下“加压1”键或“加压2”键。先显示所有保存数据的平均值，然后血压计将从最近保存的数据开始自动依次显示。

### 3. 数据删除

若要清除存储器中所有的数据，请将电池从电池盒中取出并重新装上，之前保存的数据则自动删除。



第3次测量结果



(较早的) 测量

4. 不做记录的测量  
请同时按下“加压1”和“加压2”两个键，则开始进行不做记录的测量。